

**Instructions**

*SmartTrolleys* **Post- opératoire**  
réf. **MO003STY**

**DESCRIPTIF**

Au moment du traitement, le cabinet se transforme, tous les produits à usage unique et les déchets s'accumulent sur toutes les surfaces du cabinet. Ce comportement, bien que contrôlé, augmente le risque de contamination croisée, mais surtout rend la réorganisation et l'hygiène du cabinet peu efficace et rentable, en termes de temps, entre un patient et l'autre.

Pour réduire les temps et rendre la gestion des déchets et du matériel contaminé rationnelle, nous avons étudié Smart Trolley Post-opératoire qui, grâce à son bac de décontamination incorporé et aux compartiments de tri sélectif, représente une plate-forme de récupération et de tri du matériel infecté.

Smart Trolley Post-opératoire réduit considérablement le temps pour réorganiser le cabinet entre un patient et l'autre.

**COMPOSÉ PAR:**

N°1 STRUCTURE SMART TROLLEY

N°1 MODULE TIROIR 2M

N°1 MODULE TIROIR 4M

N°1 KIT 3 PORTE POUBELLE TIROIR 4M

N°1 ESPACE POUR 1 BACS INOX 9L

N°1 PLATEAU LISSE T1 EPTA

Tiroir 2M avec 2 bacs INOX avec couvercle et joint anti clapot

Tiroir 4M avec conteneurs pour le tri sélectif

**FICHE TECHNIQUE**

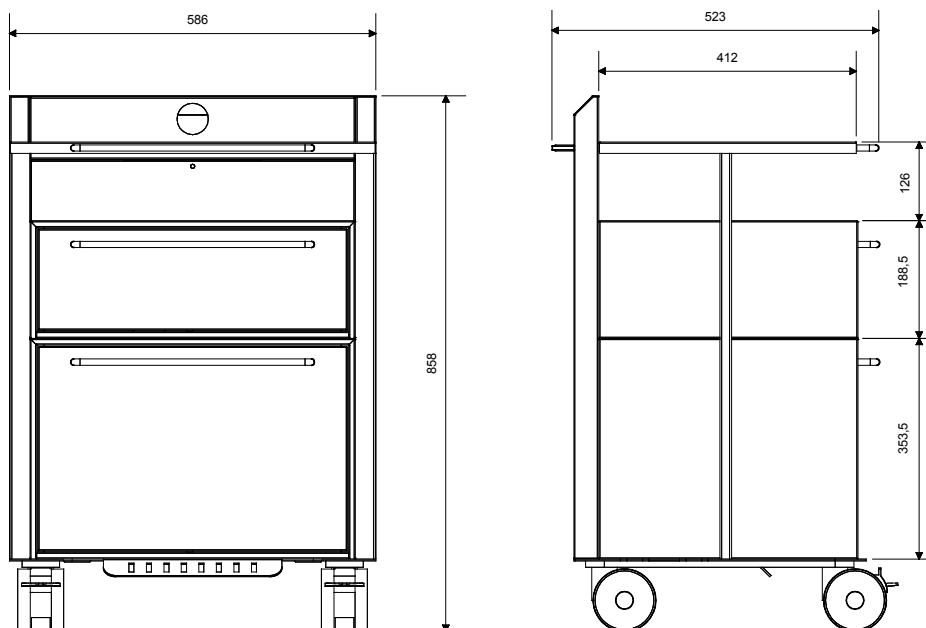
Matériel:



- Tôle en inox, finition peinture à poudres époxy antibactériennes.
- Polypropylène
- Accier inox

Galets:

- diamètre 100 mm – charge maxi 100 kg

Disegno-Plan:



| <b>DESCRIPTIF DE CHAQUE ACCESOIRE</b>  |   |
|--|---|
| <p><b>Tiroir inférieur avec:<br/>Bacs pour tri sélectif</b></p> <p>L'avantage de jeter immédiatement les déchets sans devoir se lever à chaque fois, évitant d'accumuler le matériel inutile sur les surfaces opératoires.</p> | <p><b>Tiroir supérieur avec:<br/>Bac 9 litres avec couvercle et joint</b></p> <p>Emboutie en acier inox AISI 304 18/10 à bas taux de Carbone pour résister à la corrosion et à l'agression acide des désinfectants dentaires.</p> |
|  <p>photo 1</p>   |  <p>photo 2</p>   |